



ZOETIS DIAGNÓSTICOS

vetscan Imagyst

IA Kit de Sedimento Urinario

Guía rápida de inicio

VE MÁS ALLÁ

zoetis

Guía rápida de inicio

vetscan® Imagyst IA Kit de Sedimento Urinario

Exclusivo para uso veterinario

VETSCAN® IMAGYST:

Producto electrónico.

Marca: Grundium Ocus 40

Modelo: Ocus 40 MGU-00002

Características eléctricas: 12 V DC, 48 W, 4 A. Emplear solamente la fuente de poder provista con el analizador

Temperatura de funcionamiento: 15 - 40 °C.

Temperatura de almacenamiento: -20 a 70 °C.

Equipo altamente especializado, el cual únicamente deberá ser instalado por personal técnico especializado autorizado por Zoetis México, S. de R.L. de C.V.

Guía rápida de inicio

Análisis consistente de sedimento urinario

Vetscan® Imagyst IA Sedimento Urinario ofrece un análisis de sedimentos urinarios en el punto de atención, con resultados en minutos; adicionalmente puede añadir una revisión del experto cuando sea necesario.

01 CENTRIFUGUE LA MUESTRA



- Determine si puede ser necesaria la dilución*.
- Mezcle bien la muestra.
- Transfiera 1, 2 o 3 mL al tubo de centrifugación.
- Centrifugue con el tubo correspondiente para equilibrar durante 2 minutos a 450–500 RCF (Fuerza Centrífuga Relativa, por sus siglas en inglés).
- Deje que se detenga por completo.

02 PREPARE LA MUESTRA




- Ensamble la punta de la pipeta a la micropipeta.
- Coloque en el tubo la pipeta con la punta ensamblada.
- Inclíne el tubo para verter el sobrenadante hasta que no se visualice líquido por encima del tapón.
- Regrese el tubo a la posición vertical.
- Presione el émbolo 5 veces o hasta que el sedimento se resuspenda.

03 PREPARE EL PORTAOBJETOS



- Coloque un portaobjetos preimpreso sobre una superficie plana y limpia.
- Etiquete el portaobjetos con la información del paciente en el borde esmerilado.
- Una vez resuspendido el sedimento, coloque 20 µL en el círculo fiducial.
- Cubra con un cubreobjetos de 22x22 mm.

04 AGREGUE UNA NUEVA PRUEBA

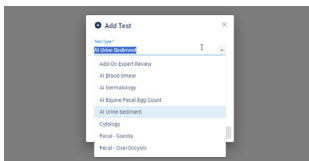


- Inicie sesión en Vetscan® Imagyst.
- Elija la prueba correcta y seleccione SCAN (ESCANEAR). La información de la muestra vendrá precargada desde cualquier sistema de software conectado a un Vetscan® FUSE†.
- Si no hay integración con un sistema de gestión de consultorio disponible, seleccione **Add New Test (+)** [Agregar nueva prueba(+)].

05 COMPLETE LA INFORMACIÓN DE LA MUESTRA



- Elija el volumen utilizado.
- Introduzca el factor de dilución, si aplica.
- Ingrese cualquier información adicional, incluyendo el color y claridad de la muestra.

06 ESCANEE EL PORTAOBJETOS

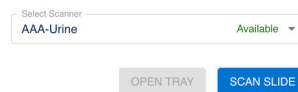


- Desbloquee el soporte de portaobjetos.
- Coloque el portaobjetos en la bandeja con la etiqueta hacia la derecha.
- Cierre el mecanismo de bloqueo.
- Seleccione **SCAN SLIDE (ESCANEAR PORTAOBJETOS)**.

* Consulte la Guía de Dilución del Vetscan® IA Sedimento Urinario en www.vetscan.mx

† Vetscan® FUSE, se vende por separado.


Guía rápida de inicio

07 REVISE LOS RESULTADOS

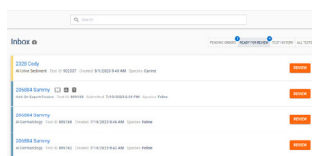

- Seleccione **REVIEW (REVISAR)**.
- Revise cualquier imagen capturada.
- Seleccione manualmente imágenes adicionales para incluirlas en el informe, si es necesario.
- Para ver más de cerca, seleccione **VIEW SLIDE (VER PORTAOBJETOS)**.
- **FINALICE** el reporte para moverlo al **TEST HISTORY (HISTORIAL DE PRUEBAS)**.
- Seleccione **SHARE (COMPARTIR)** o descargue un PDF imprimible.

08 AGREGUE REVISIÓN DE UN EXPERTO** (OPCIONAL)

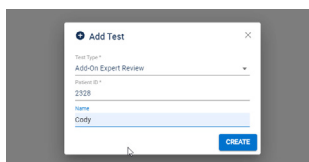

- Seleccione **Add New Test (+) [Agregar nueva prueba (+)]**.
- Elija la muestra.
- Adjunte los documentos de historial clínico (.pdf) o fotografías (.jpeg).
- Agregue un frotis de sedimento de orina teñido o un portaobjetos de preparación de línea.
- Seleccione **CLOSE (CERRAR)** y luego **SUBMIT ORDER (ENVIAR ORDEN)**.
- Encuentre la prueba deseada y seleccione **REVIEW (REVISAR)**.

09 PREPARE UN PORTAOBJETOS TEÑIDO

- Mezcle bien el sedimento de orina restante.
- Utilice una gota para crear un frotis o una preparación de línea.
- Deje secar al aire.
- Tiña el portaobjetos con una tinción tipo Romanowsky (por ejemplo, Diff-Quik).
- Deje secar al aire.
- Agregue una gota de aceite de inmersión.
- Coloque un cubreobjetos de 24x60 mm de citología.

* Consulte la Guía de Dilución del Vetscan® IA Sedimento Urinario en www.vetscan.mx

** Se pueden aplicar costos adicionales.

† Vetscan® FUSE, se vende por separado.

vetscan® Imagyst

IA Kit de Sedimento Urinario

Para México, visite: **www.vetscan.mx**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Utilice guantes de protección.

No es para uso en humanos.

Desechar los componentes usados y materiales no utilizados de acuerdo a las regulaciones locales.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Los productos VETSCAN® están diseñados sólo para uso Veterinario.

.....

Importado y Distribuido por:

Zoetis México, S. de R.L. de C.V. Paseo de los Tamarindos Número 60 Planta Baja, Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, México, Ciudad de México, Código Postal 05120.

VETSCAN® PLUS 

Para mayor información, contacte al **Soporte técnico de nuestro Servicio VETSCAN® Plus** llamando al **800 777 0384** con un horario en México de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 h y sábados de 7:00 a 13:00 h; o escribanos al correo electrónico: DXSupport.LATAM@zoetis.com

Analizador VETSCAN® IMAGYST hecho en Finlandia;

VETSCAN® IMAGYST IA KIT DE SEDIMENTO URINARIO hecho en Reino Unido.